


Руководство по подключению DR200/HE для системы холтеровского мониторинга ЭКГ


ЧТОБЫ ВЫЙТИ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ:

- Выньте и вставьте заново батарейку.
- Если не начнется 15-секундный отсчет, необходимо остановить его, нажав кнопки ENTER, ▼, ▲, EVENT в указанном порядке.


Размещение 5 электродов

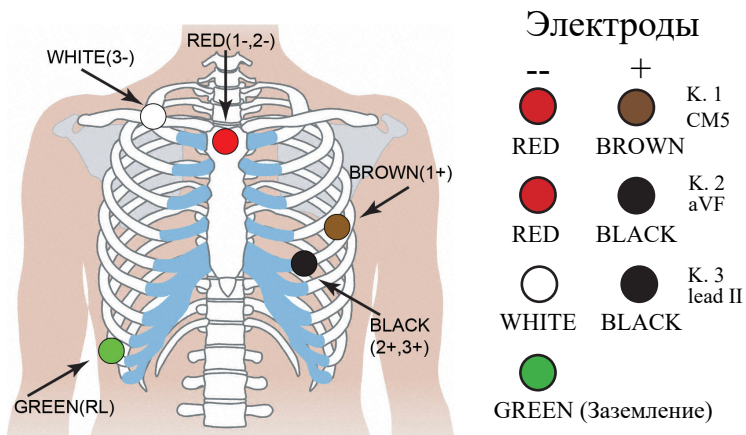

Размещение 7 электродов

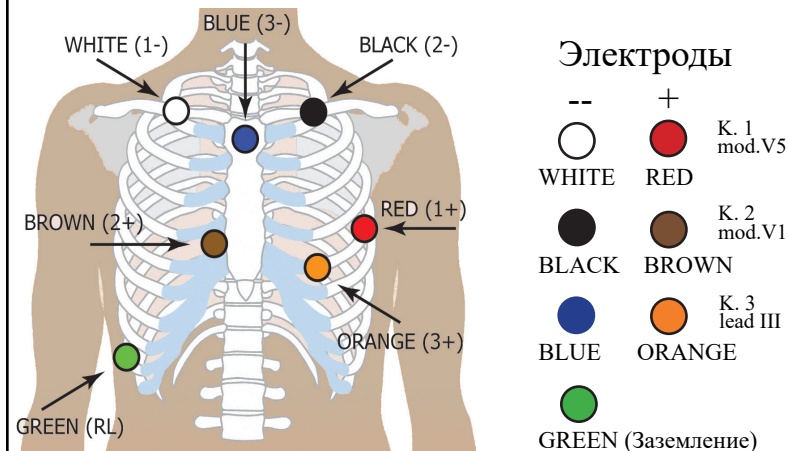


Размещение 3 электродов

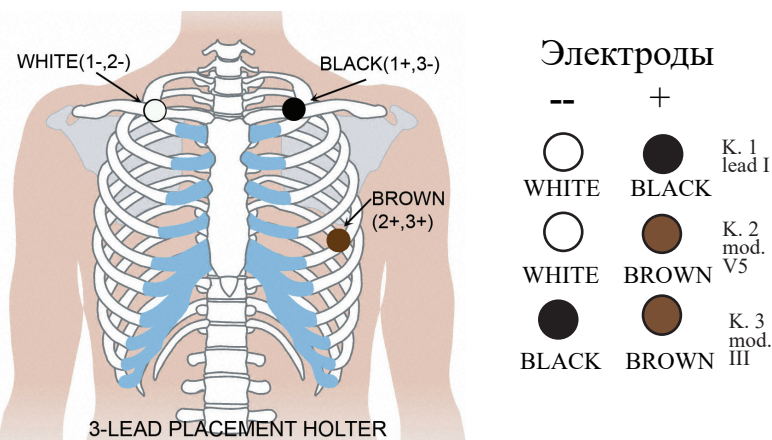

Подготовка пациента

- Выберите зону над костью, избегая области мышц и тканей молочной железы.
- Тщательно очистите место крепления электродов с помощью спирта и сбрейте волосы.
- Протрите места крепления электродов жесткой губкой или марлей. Подождите, пока места крепления электродов высохнут.
- Надежно подключите провода к электродам.
- Закрепите электроды на соответствующих местах. Крепко прижмите края пластыря, чтобы электроды держались лучше.
- Для ослабления натяжения сверните провода в петлю и закрепите их.

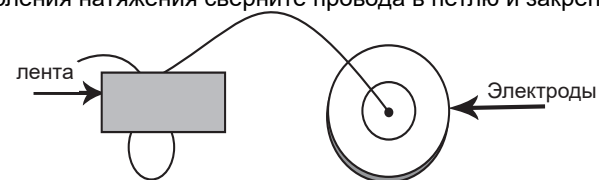

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com



R_xonly



NEMM020 - Rev-L
русский (Russian)

Руководство по подключению DR200/HE для системы холтеровского мониторинга ЭКГ

ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ С РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ



Шаг 1. Вставьте отформатированную SD-карту и батарею в регистратор. На экране появится название модели регистратора, а затем надпись «NorthEast Monitoring».* Сотрите данные из памяти, если потребуется. Нажмите ENTER для перехода в главное меню.

Шаг 2. Настройка параметров — При необходимости можно настроить параметры, перемещая курсор с помощью стрелочек ▼ и ▲ и подтверждая выбор меню с помощью кнопки ENTER. Для навигации по меню общих настроек и изменения параметров используйте кнопки со стрелочками. Для подтверждения изменений и выхода в главное меню нужно нажать кнопку ENTER.

Шаг 3. Ввод ИД пациента — Из главного меню перейдите к экрану Новый пациент для ввода Идентификатора пациента. В качестве Идентификатора пациента необходимо ввести как минимум 1 знак. Для ввода идентификатора используйте кнопки со стрелочками. После завершения нажмите кнопку ENTER. (Удерживайте кнопку ENTER для возврата.)

Шаг 4. Запуск регистратора — На экране появится сигнал ЭКГ и его качество. Регистратор начнет работать автоматически через 10 минут или после нажатия и удерживания кнопки EVENT в течение 3 секунд. Во время записи показаний в ходе холтеровского мониторинга на экране будут отображаться время и уровень заряда батареи.

Для остановки записи выньте батарейку из регистратора. Чтобы извлечь карту по окончании записи, слегка вдавите ее внутрь для разблокировки. Ни в коем случае не следует пытаться вытянуть карту из разъема, поскольку это может стать причиной поломки регистратора.

Если на экране начнется 15-секундный отсчет, можно остановить его, нажав кнопки ENTER, ▼, ▲, EVENT в указанном порядке.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:

Контраст — Настройка контрастности ЖК-дисплея

Пров.отс. — Включение/выключение сообщения об ошибке «Провод отсоед»

Маркер соб — Маркировка обнаружения событий на ЭКГ

Реж.клав. — В режиме «Беззв.» звук при нажатии кнопок отсутствует. Режим «Задержка» позволяет предотвратить случайные нажатия, требуя для записи события удерживать кнопку нажатой в течение нескольких секунд.

Тип зап — Холтер, Холтеровское

Бл.меню — Блокировка настроек регистратора

Для блокировки регистратора введите «217»

Для разблокировки регистратора введите «151»

Язык — Выбор языковых настроек

ХОЛТЕР — Выберите режим регистрации мониторинга: ВЫС.РАЗР (3К) либо 1К, 2К или 3К

Дневник — Включение/выключение ведения текстового дневника пациента.

СООБЩЕНИЯ:

ПРОВОД ОТСОЕД. — Данное сообщение появляется, если пациент не подключен или если имеются проблемы с подключением. Может быть неисправен электрод, соединительный провод или кабель, соединяющий провода с регистратором. После устранения неисправности данное сообщение будет мигать еще 10 секунд. После устранения неисправности на экране появятся параметры ЭКГ и время суток. При необходимости это сообщение об ошибке можно отключить из главного меню.

Батарея разряж. или неиспр. — Перед началом работы с регистратором установите новую батарею.

Стереть память ДА/НЕТ — Если SD-карта использовалась для предыдущего пациента, необходимо стереть имеющиеся на ней данные. Если на карте имеются данные ЭКГ, которые необходимо сохранить, следует вынуть ее и вставить новую отформатированную SD-карту.

Ошибки SD-карты — SD-карта должна быть отформатирована с помощью программного обеспечения Holter. Дополнительную информацию об ошибках SD-карт, а также форматировании и исправлении ошибок см. в «Руководстве пользователя».