


DR200/HE Holter için Bağlama Kılavuzu

Holter için 5 Elektrot Yerleştirme




Elektrotlar	
--	+
RED	BROWN
RED	BLACK
WHITE	BLACK
GREEN	GREEN (Toprak)

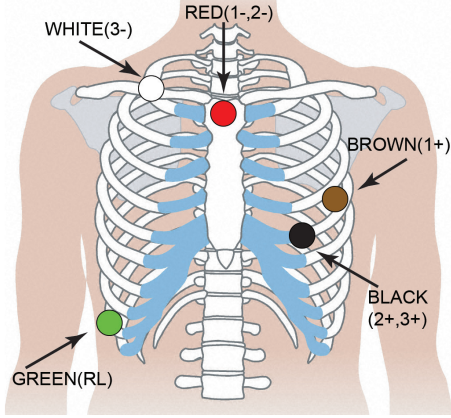

ANA MENÜYE GİTMEK İÇİN:
- Pili çıkarıp yeniden takın.
- 15 saniyelik geri sayım başlarsa
durdurmak için ENTER, , , ve
EVENT butonlarına bu sırayla basın.


Holter için 7 Elektrot Yerleştirme

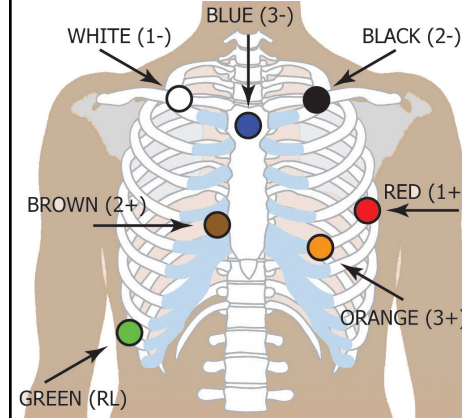

Elektrotlar	
--	+
WHITE	RED
BLACK	BROWN
BLUE	ORANGE
GREEN	GREEN (Toprak)

For oximetry, use only channels 1 and 2

Holter için 3 Elektrot Yerleştirme


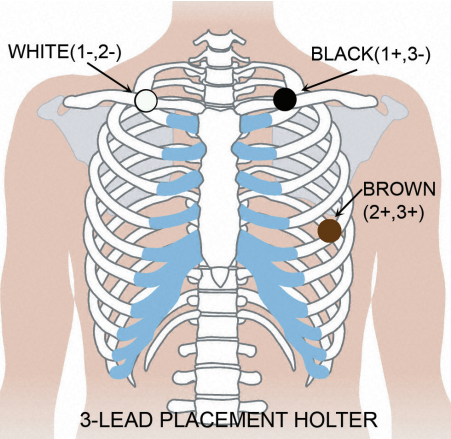


Elektrotlar	
--	+
WHITE	BLACK
WHITE	BROWN
BLACK	BROWN

3-LEAD PLACEMENT HOLTER

Hastayı Hazırlama

- Kas bölgeleri ve meme dokusundan kaçınarak kemik üzerinde bir bölge seçin.
- Elektrot bölgelerini alkolle kuvvetle temizleyin ve kılları almak için jilet kullanın.
- Elektrot bölgelerinde bir silme pedi veya gazlı bez ile abrazyon yapın. Elektrotları uygulamadan önce bölgelerin kurumasını bekleyin.
- Elektrotları elektrot tellerine sıkıca tıklatarak yerleştirin.
- Elektrotları uygun bölgelere uygulayın. Tutarlı yapışma için yapışkan kenarı sıkıca bastırın.
- Gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için elektrot kablolarında halka yapın ve yerine bantlayın.

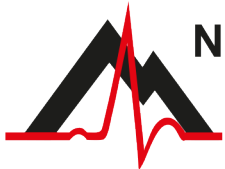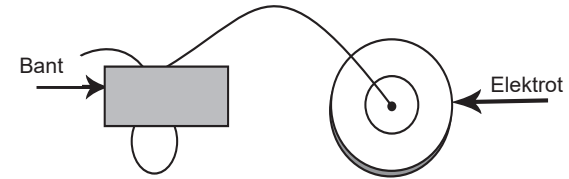

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com

advancing Holter technology



www.nemon.com



NEMM020 - Rev-L - Türkçe

DR200/HE & DR300 Holter için Hızlı Başlangıç Kılavuzu



HOLTER KAYDINI BAŞLATMAK İÇİN

- Basamak 1** - Kayıt cihazına formatlanmış SD Kartı ve bataryayı yerleştirin. Ekran kayıt cihazı modelini ve daha sonra "NorthEast Monitoring" bilgisi gösterir. Eğer bu yönde komut alınırsa hafızayı silin. Ana menüye devam etmek için ENTER kısmına basın.
- Basamak 2** - Ayarları Düzenle - İsterseniz, Okları - ▼ ve ▲ - kullanarak imleci hareket ettirip seçmek için ENTER düğmesini kullanarak ayarları değiştirin. Girdileri ayarlamak üzere Genel Ayarlar menüsüne gitmek için okları kullanın. Seçip menüye dönmek için ENTER kısmına basın.
- Basamak 3** - Hasta Kimliğini Girin - Ana menüden Yeni Hasta ekranına giderek Hasta Kimliği girin veya doğrulayın. Hasta Kimliği için en az bir karakter girilmelidir. Okları kullanarak ENTER kısmına basarak kimliği girin ve bitirdiğinizde EVENT kısmına basın. (Geri gitmek için ENTER düğmesini basılı tutun.)
- Basamak 4** - Kayıt Cihazını Başlatın - EKG sinyali ve kalitesi ekranda görünecektir. Kayıt cihazı 10 dakikadan sonra otomatik olarak veya EVENT düğmesine 3 saniye basılmasıyla başlayacaktır. Süre ve pil seviyesi, Holter kaydı yapılırken ekranda görülecektir.

Kaydı durdurmak için, pili kayıt cihazından çıkarın. Kayıttan sonra kartı çıkarmak için serbest bırakmak üzere içeriye hafifçe itin. Kartı asla yuvadan çekmeyin çünkü kayıt cihazına zarar verebilir.

Ekran 15 saniyelik geri sayım gösterirse bunu sırasıyla ENTER, ▼, ▲, ve EVENT düğmesine basarak durdurabilirsiniz.

GENEL AYARLAR:

- Kontrast** - LCD ekranı kontrastını ayarlar
- Elekt(trot) Gev(şek)** - Elektrot Gevşek hata mesajını Etkinleştirir/Devre Dışı bırakır
- Olay İş(aretleyici)** - EKG'de olay konumunu işaretler
- Tuş mod(u)** - "Sessiz" tuş biplemesini kapatır. "Gec(ikme)" hastanın bir olayı kaydetmek için düğmeyi birkaç saniye basılı tutmasını gerektirerek kazayla olay kaydını önler
- Kayıt Tipi** - Holter
- Menü Kil(idi)** - Kayıt cihazında ayarları kilitlet
Kayıt cihazını kilitlemek için "217" girin
Kayıt cihazının kilidini açmak için "151" girin
- Dil** - Çok sayıda dil arasından seçim yapın
- Holter** - Yüksek Çözünürlüklü (3 Kanallı) veya 1 Kanallı, 2 Kanallı veya 3 Kanallı Holter kaydını seç
- Günlük** - Hasta metin günlüklerini Etkinleştirir/Devre Dışı Bırakır.

MESAJLAR:

ELEKT(ROT) GEVŞEK - Hasta bağlı olmadığı veya bağlamayla ilgili bir problem olduğunda oluşur. Problem bir elektrot, bir kablo veya kayıt cihazı ile elektrotlar arasındaki kablo olabilir. Mesaj, düzeltildikten sonra 10 saniye yanıp sönmeye devam eder. Düzeltildiğinde ekranda EKG ve günün zamanı görülür. İsterseniz bu hata mesajını ana menü yoluyla kapatabilirsiniz.

Batarya ZAYIF veya ARIZA - Kayıt cihazını başlatmadan önce yeni batarya yerleştirin.

Bellek sil? E(vet)/H(ayır) - SD kartı önceki bir hastaya kullanıldıysa şimdi silmeniz gerekir. Kartın üzerinde kaybetmemek istediğiniz EKG verileri bulunduğu silinmemesi gerekiyorsa çıkarmanız ve formatlanmış yeni bir SD kartı koymanız gerekir.

SD Kartı hataları - SD Kartları LX Holter yazılımınız kullanılarak formatlanmalıdır. SD Kartı hataları ve formatlama ve düzeltmenin nasıl yapılacağını ayrıntıları için Kullanıcı El Kitabınıza bakınız.